

WBS-JACKE



Produktbeschreibung:

Die WBS-Jacke hat vorne 4 Taschen und 4 hinten, von denen jede 1 selbstheizendes Patch enthält, also insgesamt 8 Patches. Letztere werden wenige Minuten nach dem Öffnen des Pakets, in dem das Gerät enthalten ist, in Kontakt mit der Luft aktiviert und geben Wärme frei, die bis zu 14 Stunden ununterbrochen konstant bleibt. Um maximale Haftung am Körper zu erreichen, können Sie das Gerät mit 4 funktionalen Gummibändern (2 pro Seite) und 4 Velcro-Gurten (2 pro Seite) einstellen.

Vorgesehene Nutzung:

Die WBS-Jacke ist eine persönliche Schutzausrüstung, die zum Schutz vor Kälte unter nicht-extremen Wetterbedingungen zur Behandlung und Prävention von Unterkühlung in allen Zivilnotstands- und Erste-Hilfe-Kontexten gedacht ist und in allen Situationen mit längerer Exposition gegenüber niedrigen, nicht extremen Temperaturen.

Behandlungsprinzip und Leistungsmerkmale:

Die WBS-Jacke verwendet ein selbstheizendes System, das auf einer exothermen chemischen Reaktion zwischen den Komponenten der Heizflächen basiert. Wenn sie der Luft ausgesetzt ist, die Pflaster aktivieren eine Reaktion zwischen dem Eisenpulver und dem atmosphärischen Sauerstoff, die durch das Vorhandensein anderer Katalysatoren erleichtert wird. Diese Reaktion erzeugt schnell und sicher Wärme und verteilt sie gleichmäßig in die in die Jacke integrierten Taschen. Konstruktion Das SMS-Polypropylengewebe gewährleistet eine effektive Wärmedämmung, optimiert die Wärmespeicherung und bietet eine langanhaltende Wärmeversorgung über mehr als 14 Stunden.

Anleitungen zur Anwendung

- Entfernen Sie die PSA vorsichtig aus der Verpackung, indem Sie die vorgeschrittene Ecke mit der Aufschrift "Open here" abreißen;
- Entfalten Sie es mit beiden Händen;
- Trage die WBS-Jacke, indem du sie vom Kopf anziehst;
- Schließen und justieren Sie die 4 Gummibänder und 4 klebevollen Klettbander für maximale Haftung am Körper;
- Setzen Sie die PSA Luft aus, damit die Patches innerhalb von 15 Minuten die durchschnittliche Betriebstemperatur erreichen;
- Wenn du das Gerät beendet hast, entferne es innerhalb von 14 Stunden.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

Für den sicheren und effektiven Einsatz der WBS-Jacke beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Das Gerät kann nur einmal verwendet werden, da es wegwerfbar ist;
- Die Verwendung von PSA ist für Personen verboten, die das Benutzerhandbuch nicht sorgfältig gelesen haben;
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen platzieren;
- Das Gerät ist nicht steril;
- Außerhalb der Reichweite von Personen mit Funktionen bleiben von Untauglichkeit (Menschen mit geringerer Fähigkeit, Gefahren einzuschätzen);
- Das Gerät ist kein Spielzeug und kann und sollte aus keinem Grund Kindern (Personen unter 14 Jahren) für Freizeitaktivitäten zur Verfügung gestellt werden;
- Bewahren Sie Produktverpackungen und Verpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie sie gemäß den geltenden Recyclingvorschriften. Die Verpackung darf niemals am Mund und an der Nase getragen werden;
- PSA darf NIEMALS in direktem Hautkontakt getragen werden, sondern IMMER über Kleidung;
- Verwenden Sie nicht in sauerstoffreichen Umgebungen, in einer hyperbaren Kammer oder in Anwesenheit von Sauerstofftherapiegeräten;
- Es ist absolut verboten, Änderungen an der PSA vorzunehmen. Jeder Schaden, der durch die unsachgemäße Änderung des Geräts durch einen unbefugten Betreiber verursacht wird, entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung;
- Vermeiden Sie es, die Außenverpackung der Patches durch spitze oder scharfe Gegenstände zu beschädigen, um das Risiko einer Beschädigung des Inhalts zu vermeiden;
- Die Dekompression der Primärverpackung beeinflusst nicht die Leistung des Bauelements;
- Bewahren Sie die Jacke in der Verpackung auf, bis sie einsatzbereit ist;
- Verwenden Sie es nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Das Nichtbefolgen dieser Warnungen kann ernsthafte Risiken für die Gesundheit des Patienten mit sich bringen.

	Die Jacke darf nicht zusammengeklappt sein.		Die Jacke sollte bei Patienten mit schwerer peripherer Durchblutungsstörung nicht verwendet werden.
	Zur Befestigung der Jacke dürfen keine zusätzlichen Riemen, Bänder, Gürtel oder Seile verwendet werden.		Beobachte die Hautreaktion regelmäßig.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sind unerlässlich, um die sichere Nutzung der WBS-Jacke zu gewährleisten und mögliche thermische Schäden zu vermeiden:

- Die korrekte Seite der Jacke wird durch das WBS-Logo auf der Vorderseite angezeigt und muss immer korrekt positioniert werden;
- Auch wenn das Gerät keinen direkten Kontakt mit der Haut hat (es muss am bekleideten Patienten angebracht werden), ist es unerlässlich, die Hautreaktion ständig zu überwachen, insbesondere bei längerer Nutzung;
- Vermeiden Sie direkten Hautkontakt mit offenen Wunden, Blutergüssen, Ödemen, Erfrierungen oder transdermalen Verbänden. Die erzeugte Wärme kann die Diffusion erhöhen von Medikamenten aus transdermalen medizinischen Systemen (Pflaster);
- Falten Sie die Jacke nicht zurück, üben Sie keinen Druck aus und erhöhen kein Gewicht auf die Jacke, einschließlich medizinischer Instrumente oder andere schwere Gegenstände;
- Nicht bei Patienten mit schweren peripheren Durchblutungsstörungen verwenden, darunter:
 - Schwere Hypotonie oder vorhersehbare anhaltende Hypotonie;
 - Schwere periphere Gefäßerkrankungen;
 - Aortenchirurgie oder distale Aortenklammern;
 - Schwere Herzinsuffizienz oder kardiogener Schock.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Schwangeren oder ohne vorherige ärztliche Konsultation zu stillen.

Kontraindikationen und Nebenwirkungen

Im Falle von Hypersensibilisierung, Hautreizung oder Hautvorkommen Bei Allergien wird empfohlen, die Verwendung von PSA sofort abzusetzen und einen Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Der Nutzer muss alle Kontraindikationen, Nebenwirkungen oder schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit der Nutzung des Geräts sowohl dem Hersteller (certificazioni@biozetatec.com) als auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates melden, um zur Verbesserung der Produktsicherheit beizutragen.

Lagerung und Stabilität

Die WBS-Jacke ist einzeln vakuumverpackt in Polyamid- und Polyethylenbeuteln, die darauf ausgelegt sind, die Integrität des Produkts zu gewährleisten und es bis zu einer Kontamination vor Verunreinigungen zu schützen zum Zeitpunkt der Anwendung. Es ist unisex und in einer einzigen Variante erhältlich in Größe und Farbe. Die WBS-Jacke sollte an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden, fern von Wärmequellen, die die Integrität des Produkts beeinträchtigen könnten. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Verpackung fest verschlossen bleibt, bis sie einsatzbereit ist, um den Schutz des Geräts vor Verunreinigungen und äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit und Staub zu gewährleisten. Richtige Lagerung hilft um die Wirksamkeit und Sicherheit des Geräts während der gesamten angegebenen Dauer aufrechtzuerhalten. PSA behält ihre Eigenschaften 48 Monate ab dem Herstellungsdatum, wenn sie in ungeöffneter Verpackung aufbewahrt wird. Sobald sie geöffnet ist, muss die Jacke sofort verwendet werden und nicht länger gelagert werden. Persönliche Schutzausrüstung hat die außen auf der Verpackung abgebildet ist.



Zeta S.r.l. Via Loggia dei Pisani, 25
80133 Napoli - Italia
www.zetagroup srl.com




Kategorie I Persönliche Schutzausrüstung



WBS-JACKE

Notfall-Selbstheizjacke

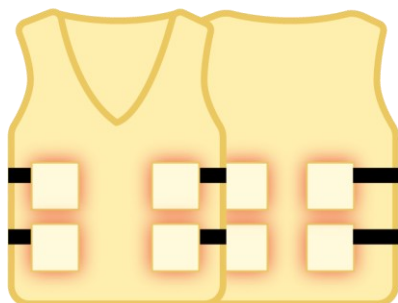

VERWENDEN SIE NICHT, WENN DAS PAKET BESCHÄDIGT IST

Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften und in Absprache mit den Vorschriften Ihrer Gemeinde erfolgen. Die daneben stehende Tabelle zeigt die Recyclingmethoden:

IFU UND SCHACHTELN	PAPIER		JACKE	UNSORTIERTER ABFALL	
VAKUUMBEUTEL	PLASTIK		PATCH	UNSORTIERTER ABFALL	

Symbollegende

SÍMBOLO	BEDEUTUNG	SÍMBOLO	BEDEUTUNG
	GERÄTEHERSTELLER		NICHT VERWENDEN, WENN DIE VERPACKUNG BESCHÄDIGT IST
	CE-KENNZEICHNUNG		ERFORDERLICH FÜR DIE MARKTÜBERWACHUNG
	EINWEGGERÄT, NICHT WIEDERVERWENDEN		VERFALLSDATUM
	CHARGENNUMMER		REF-NUMMER
	NICHT STERIL		WARNUNGEN
	ENTHÄLT KEINE PHTHALATE		ENTHÄLT KEIN LATEX
	ACHTUNG: GEBRAUCHSANWEISUNG LEBEN		TROCKEN HALTEN UND VOR FEUCHTIGKEIT UND DIREKTEM SONNENLICHT GESCHÜTZT



Weitere Informationen finden Sie unter www.wbs.care



Referenz: WBS0005



Zeta S.r.l. Via Loggia dei Pisani, 25
80133 Napoli - Italia
www.zetagroupsl.com



Kategorie I Persönliche Schutzausrüstung

